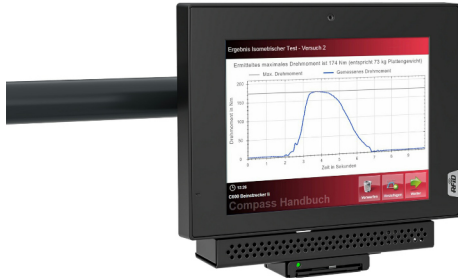


compass 540**smart assist ISO**

Art.-Nr. 10629200

TECHNISCHE DATEN

» Für alle compass 540 Geräte

**AUSSTATTUNG**

- » Intuitive Bedienung über 8" Zoll Touchscreen-Monitor
- » Quickstart/Powertraining ohne RFID- oder Chipkartennutzung
- » RFID-/Chipkarten-Reader
- » Medizinischer LAN-Isolator
- » Sinuales Feedback-Training
- » Isometrie zur vergleichenden Messung der Maximalkraft

TESTVERFAHREN

- » Bewegungsmaßtest zur Bestimmung der physiologischen Bewegungsamplitude
- » Submaximale Testung nach der Wiederholungsmethode, ergänzt durch eine objektive Bewertung der Testdurchführungsqualität und der subjektiven Bewertung des Anstrengungsgrades durch den Probanden mittels RPE-Skala
- » Isometrischer Test für die Messung der Maximalkraft nach der 1-Wiederholungsmethode
 - » Ein Verfahren, das unter fachkompetenter Anleitung durchgeführt wird
 - » Die Testdaten werden in der Trainings- und Planungssoftware proxotrain dokumentiert